



# EQUIPOS 7LIVES

EQUIPOS COMPATÍVEIS  
COM AS BOMBAS  
BENEFUSION  
DA MINDRAY



# PARENTERAL CRISTAL

Equipos transparentes para infusões parentais

**CÂMARA COM ENTRADA DE AR, MACROGOTAS, LUERLOCK ROTATÓRIO, INJETOR LATERAL E TAMPA HIDROFÓBICA**

Registro Anvisa 80463919017




220 cm

Código MW - 12297  
MF22PLR

250 cm

Código MW - 12298  
MF25PLR

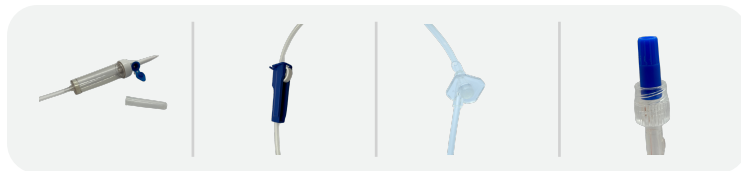

Conector proximal com entrada de ar

Pinça Roleta

Injetor lateral auto cicatrizante

Tampa hidrofóbica

**CÂMARA COM ENTRADA DE AR, MACROGOTAS, LUERLOCK ROTATÓRIO, INJETOR LATERAL E TAMPA FIXA**

Registro Anvisa 80463919017




220 cm

Código MW - 12301  
MF22PLF

250 cm

Código MW - 12302  
MF25PLF

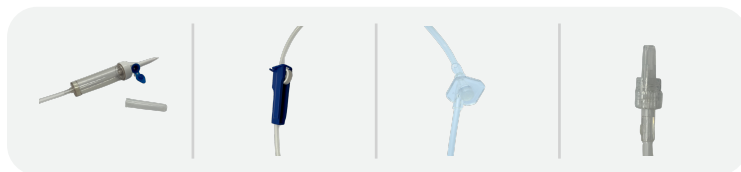

Conector proximal com entrada de ar

Pinça Roleta

Injetor lateral auto cicatrizante

Conector distal

# PARENTERAL FOTOSSENSÍVEL

Administração de soluções fotossensíveis

**CÂMARA COM ENTRADA DE AR, MACROGOTAS, LUERLOCK ROTATÓRIO, INJETOR LATERAL E TAMPA HIDROFÓBICA**

Registro Anvisa 8046391916




220 cm

Código MW - 12305  
MF22FTPLR

250 cm

Código MW - 12306  
MF25FTPLR

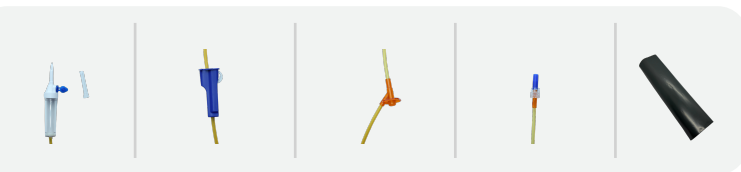

Conector proximal com entrada de ar

Pinça Roleta

Injetor lateral auto cicatrizante

Tampa hidrofóbica


Saco protetor

# ENTERAL

Administração de dietas enterais

## EQUIPO ENTERAL COM PERFURADOR SPIKE, ENTRADA DE AR E CONECTOR DISTAL GRADUADO

Registro Anvisa 80463919012

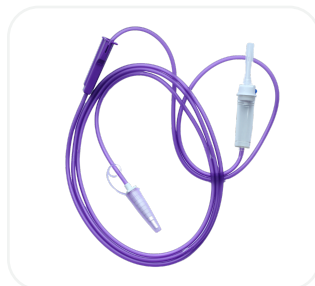

220 cm

Código MW - 12007  
MFA22EN

250 cm

Código MW - 12008  
MFA25EN



Proximal:  
com entrada  
de ar

Pinça Roleta

Distal:  
conector  
graduado

## EQUIPO ENTERAL ENFIT COM CONECTOR EM CRUZ E CONECTOR DISTAL GRADUADO E ENFIT

Registro Anvisa 80463919012



220 cm

Código MW - 12010 / 12013 -  
MF22ENFD / MF22ENFG

250 cm

Código MW - 12011 / 12014 -  
MF25ENFD / MF25ENFG



Proximal:  
Enfit em  
cruz

Corta fluxo

Câmara  
flexível

Pinça rolete

Distal:  
ponteira  
graduada

## EQUIPO ENTERAL ENFIT COM DUAS VIAS E CONECTOR DISTAL GRADUADO E ENFIT

Registro Anvisa 80463919012



220 cm

Código MW - 12137 / 12016 -  
MF22ENFD2 / MF22ENFG2

250 cm


Código MW - 12138 / 12017 -  
MF25ENFD2 / MF25ENFG2



Proximal:  
ponteira de  
hidratação

Corta fluxo

Câmara  
flexível

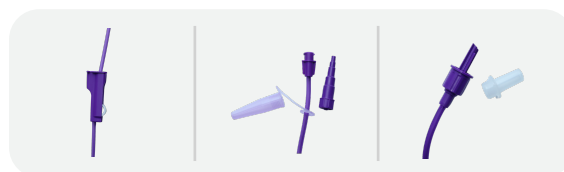


Pinça rolete

Distal:  
ponteira  
Enfit

Proximal  
Enfit em Cruz

## EQUIPO ENTERAL ENFIT COM CONECTOR PROXIMAL EM CRUZ E CONECTOR DISTAL GRADUADO E ENFIT E INJETOR LATERAL ENFIT

Registro Anvisa 80463919012

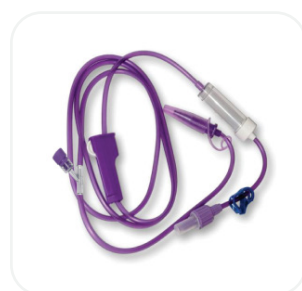


220 cm

Código MW - 12263 / 12260  
MFA22ENFIG / MFA22ENFID

250 cm

Código MW - 12264 / 12266  
MFA25ENFIG / MFA25ENFID

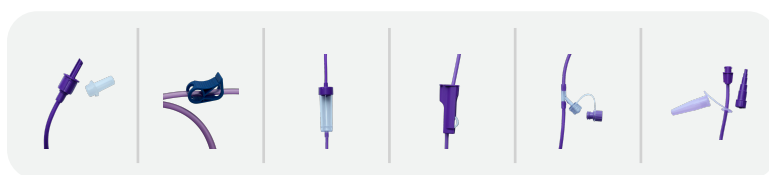

Proximal:  
Enfit em  
cruz

Corta fluxo

Câmara  
flexível

Pinça rolete

Injetor  
lateral

Distal  
ponteira  
graduada

## EQUIPO ENTERAL ENFIT DUAS VIAS, CONECTOR PROXIMAL EM CRUZ E SPIKE, COM INJETOR LATERAL, DISTAL GRADUADO E ENFIT

Registro Anvisa 80463919012




220 cm

Código MW - 12261  
MF22ENFID2 / MF22ENFIG2

250 cm

Código MW - 12267  
MF25ENFID2 / MF25ENFIG2

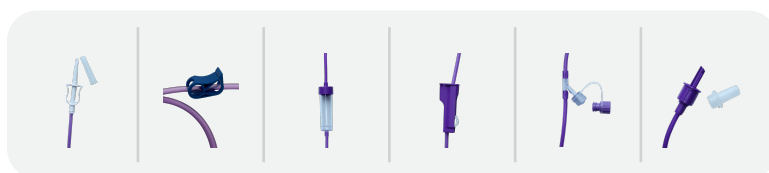

Proximal:  
ponteira de  
hidratação

Corta fluxo

Câmara  
flexível

Pinça rolete

Distal  
ponteira  
Enfit

Proximal  
Enfit em  
cruz

## EQUIPO PARENTERAL LIVRE PVC SEM FILTRO - BOMBA INFUSÃO

Registro Anvisa 80463919012




220 cm

Código MW - 13377  
MF22LPINFLR

250 cm

Código MW - 13379  
MF25LPINFLR

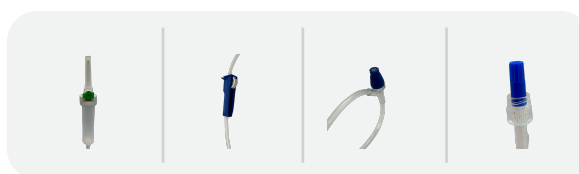

Ponteira  
proximal com  
entrada de ar

Pinça rolete

Injetor  
lateral

Tampa  
hidrofóbica

## EQUIPO PARENTERAL LIVRE PVC COM FILTRO - BOMBA INFUSÃO

Registro Anvisa 80463919012




220 cm

Código MW - 13376  
MF22LPFINFLR

250 cm

Código MW -  
MF25LPFINFLR

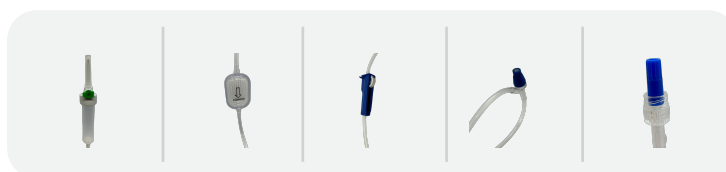

Ponteira  
proximal com  
entrada de ar

Filtro  
de linha

Pinça  
rolete

Injetor  
lateral

Tampa  
hidrofóbica



# BOMBAS DE INFUSÃO



# BOMBAS DE INFUSÃO



## BOMBA VP3

VP3 BeneFusion, apresenta um conceito fácil de usar, que simplifica o fluxo de trabalho de infusão e satisfaz várias necessidades clínicas, além de contribuir para práticas clínicas sem preocupações, fornecendo soluções essenciais e garantindo infusões altamente precisas e seguras.

- Guia rápido de uso
- Sensores de detecção de alta precisão
- Sistema dinâmico de pressão
- Sistema Antibolus
- Início rápido
- Mudança de fluxo facilmente sem parar a bomba



## BOMBA SP3

SP3 BeneFusion, além do atendimento aprimorado com infusão precisa e segura, ajuda a suavizar o processo de transferência de pacientes durante as atividades pré-hospitalares e intra-hospitalares, economizando muito tempo no atendimento dos pacientes.

- Fácil de transportar: pesando apenas 1,45 kg, é portátil e fácil de transportar.
- Bateria de longa duração: a vida da bateria é longa o suficiente para durar até 12 horas.
- Proteção IP34: alto nível de resistência à água e poeira garante grande durabilidade.
- Aplicação em ambulância: atende à norma EN-1789 para aplicação em ambulâncias.



## BOMBA eVP

eVP BeneFusion, eficiência no fluxo de trabalho com tela de toque capacitiva colorida de 3,5" oferece aos usuários uma excelente experiência com uma operação fácil.

- A interface de usuário intuitiva permite a programação rápida de parâmetros chave, tornando o processo de fluxo de trabalho muito mais fácil.
- Sistema de Alarme Intuitivo. Uma animação educativa é exibida para orientar os usuários a resolver o problema rapidamente.
- Com o SmartAIR™, o BeneFusion eVP aumenta significativamente o nível de segurança da administração intravenosa. Sensor ultrassônico duplo para detectar as bolhas de ar com mais precisão, evitando falta de alarme ou falso alarme de entrada de ar.
- Tamanho de detecção de bolhas de ar de 15µl, garantindo a segurança do paciente durante toda a infusão, mesmo no caso de recém-nascidos.



## BOMBA eSP

### SafeDose™

- O código de cores dos nomes dos medicamentos ajuda os usuários a selecionar e verificar facilmente o medicamento correto.
- O software SafeDose™ Info permite programar parâmetros de infusão automaticamente para aumentar a eficiência.
- O SafeDose™ DERS ajuda a evitar erros de dosagem com restrição de limites rígidos ou flexíveis.
- Ajustando facilmente a terapia de infusão em 3 etapas.
- Rápida resolução de problemas
- Sistema dinâmico de pressão, indica em forma de velocímetro com pressão numérica para monitorar rapidamente a tendência da pressão em linha. Alerta com uma mensagem visual sobre a possível oclusão antes de interromper a infusão. O mecanismo de tentativa automática permite retomar a infusão o antes possível para garantir a infusão contínua.
- Sistema de Alarme Intuitivo, uma animação educativa é exibida para orientar os usuários a resolver o problema rapidamente.

# BOMBAS DE INFUSÃO



## PCA


- O modo de analgesia controlada pelo paciente (PCA) geralmente é usado para infusão pós-operatória de medicamentos para alívio da dor.
- O modo PCA permite que os pacientes realizem infusões de bolos dentro do limite definido de acordo com suas necessidades individuais.
- No modo PCA, a tela de toque é bloqueada automaticamente se não for operada dentro de vinte minutos. O modo PCA é protegido por senha, e o acesso e a alteração do modo PCA só podem ser permitidos por pessoal autorizado.
- A seringa tem travada pela tampa anti-remoção depois que for carregada.



## TCI

- No modo infusão alvo controlada (TCI), a concentração desejada de medicamento no corpo humano (Alvo) é definida, em vez de uma taxa de infusão. A bomba atinge a concentração alvo definida automaticamente através do cálculo utilizando a base do algoritmo num modelo farmacocinético (protocolos estabelecidos de anestesia)

Temos quatro fármacos de anestesia, onde os parâmetros padrão de TCI não são adequados para todos os pacientes e devem ser ajustados de acordo com as características do paciente.

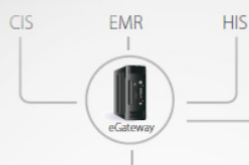

## BENEFUSION SÉRIE E

Gerenciamento centralizado dos dados e sinergia conectada

- Capaz de monitorar até 1.100 bombas simultaneamente
- Capaz de obter informações sobre infusão e alarme em qualquer lugar e a qualquer momento
- Acesso ao HIS/CIS/EMR através do protocolo HL7

Eficiência em Informática

Monitoramento central integrado

O BeneVision CMS™ oferece monitoramento completo de todos os detalhes dos sinais vitais e do tratamento de infusão dos pacientes, fornecendo informações abrangentes para os clínicos a fim de melhorar a qualidade do atendimento ao paciente.



## Entre em contato

➤ [www.medicalway.com.br](http://www.medicalway.com.br)

☎ (41) 3253-0500 - PR

☎ (47) 2033-7046 - SC

☎ (51) 3209-0813 - RS

✉ [sac@medicalway.com.br](mailto:sac@medicalway.com.br)